


Guía Planeación I

CHRISTOPHER LÓPEZ RUIZ

AP-PA

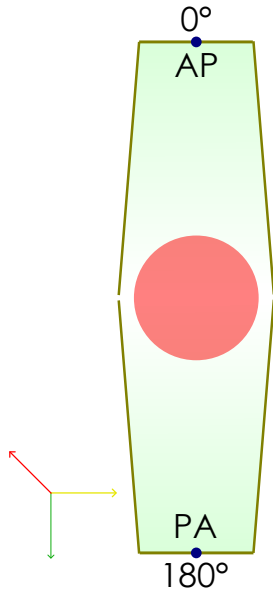

Preinspección

Visualizar la CT junto a su origen, revisar la orientación e identificar el PTV de interés.

Nuevo Plan

Se inserta una nueva etapa de tratamiento, posteriormente en esta etapa se inserta un nuevo plan con el PTV de referencia, seleccionar tipo de tratamiento, equipo, posición y energía.

Redondear el isocentro considerando tolerancias de 5 decimales.

Añadir campos

Automáticamente se crea un campo con un ángulo de 0° , a partir de este se crea un campo opuesto para poder obtener la disposición de campos de la figura ???.

AP-PA/Oblicuos

Holocráneo

Caja

IMRT
